

miniBTE 312 Z SERIES i70

Z series™ SANS-FIL



Contour d'oreille pile 312



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Z SERIES i70	
	Standard	Configuration Tube fin
Technologie numérique sans-fil 900sync	✓	✓
Bouton-poussoir Multiprogramme Contrôle du volume et des programmes	✓	✓
Solutions Téléphone Automatique	✓	✓
Directivité	Directionnel adaptatif	Directionnel adaptatif
Matrix maximum	126/65	120/64
Streaming sans-fil avec les accessoires SurfLink Transmission des sons de différentes sources audio	✓	✓
Tiroir pile sécurisable	✓	✓
Embout standard		✓
Embout sur-mesure	✓	✓
Autonomie pile 312 (moyenne d'utilisation de 16h/j)	6-8* j	6-8* j

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation de la technologie sans-fil

COULEURS

Standard




Champagne




Bronze



Espresso

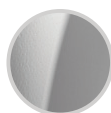

Sterling

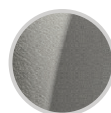

Slate



Black



White & Sterling

FONCTIONS AVANCÉES	Z SERIES i70
PRÉCISION DES RÉGLAGES (CANAUX/BANDES)	8/8
RÉGLAGES UTILISATEUR SYNCHRONISÉS Des réglages pré-programmés sur une seule aide auditive permettent d'ajuster le volume ou les programmes. Vous n'avez plus besoin de régler manuellement et indépendamment les deux aides auditives.	●
TÉLÉPHONE STÉRÉOPHONIQUE : Cette fonction active automatiquement le mode "Téléphone" d'un côté et réduit le gain de l'autre, pour faciliter l'écoute lors des conversations téléphoniques.	●
ABAISSEMENT FRÉQUENTIEL (SPECTRAL IQ) : Optimise l'audibilité en temps réel en identifiant les indices vocaux aigus et en les dupliquant dans les basses fréquences.	Standard ●
RÉDUCTION DU BRUIT (VOICE IQ?) : Système de réduction de bruit et de préservation de la parole, votre compréhension même dans les milieux bruyants se fera sans effort ni fatigue cérébrale.	Standard ●
VISION DIRECTIONNELLE: Permet d'améliorer l'audibilité de la parole, même dans les milieux bruyants.	●
ANNULATEUR DE LARSEN : Elimine la quasi-totalité des sifflements. Pas de sifflement même au téléphone.	●
DATA LOGGING : Programmation de l'aide auditive selon le profil auditif et le style de vie de l'utilisateur.	●
ANALYSEUR DE SCÈNE AUDITIVE : Gestion et adaptation à l'environnement sonore, aide à mieux comprendre dans les environnements bruyants.	●
SIGNAUX SONORES ADAPTATIFS : Des signaux sonores ou vocaux vous indiquent l'état de votre aide auditive et de la pile. Vous savez précisément quand changer votre pile.	●
MULTIPROGRAMME (SI ACTIVÉ) : Accès simple et rapide aux programmes les plus fréquemment utilisés.	●
PROGRAMMES MUSIQUE & TÉLÉVISION (M-T) : Des programmes pré-réglés pour la musique ou la TV.	T
ACCESSOIRES SURFLINK	
<ul style="list-style-type: none"> • SurfLink Mobile 2 : solution de téléphone "mains libres" qui vous permet de converser par téléphone via vos aides auditives et d'en utiliser le microphone pour communiquer. Fait fonction également d'assistant d'écoute, de streaming média et d'aide auditive à distance. • Emetteur SurfLink Media 2 : Vous vous connectez sans-fil avec pratiquement toutes les sources audio, sans avoir besoin de pairing ou le port d'un accessoire supplémentaire. • Télécommande SurfLink : pour les patients qui préfèrent contrôler leurs aides auditives à l'aide d'une télécommande. • Microphone SurfLink : assistant d'écoute qui transmet la voix dans vos aides auditives pour faciliter les conversations en tête-à-tête ou en groupe dans des environnements sonores complexes. 	●

DONNÉES TECHNIQUES ANSI AU COUPLEUR 2 CC	miniBTE 312 Z SERIES i70	
CONFIGURATIONS	STANDARD	TUBE FIN (Taille 3+, fermé)
Niveau de sortie maximum (90 dB SPL)	126	120
Niveau de sortie maximum HFA (90 dB SPL)	118	108
Gain maximum (dB)	65	64
Gain maximum HFA (dB SPL)	60	52
Bande passante (Hz)	100 - 7400	100 - 7200
Fréquence de référence test HFA (kHz)	1.0 - 1.6 - 2.5	1.0 - 1.6 - 2.5
Gain de référence test HFA (dB)	41	31
Distorsion harmonique		
500 Hz	< 5 %	< 2 %
800 Hz	< 3 %	< 1 %
1600 Hz	< 3 %	< 2 %
Sensibilité de la bobine d'induction magnétique		
HFA SPLITS (dB SPL)	97	87
Consommation (mA)	1.5*	1.5*
De repos (mA)	1.3*	1.3*
Estimation de la vie d'une pile (utilisation moyenne 16h/j) - Jours	6-8*	6-8*

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation de la technologie sans-fil

Conditions de mesure

Les données techniques ont été obtenues en utilisant les normes ANSI S3.22 (2003), ANSI C63.19 (2007), IEC 60118-7 (2005), IEC 60711 (1981), DIN 45605 (1989) et IEC 60118-0 (1983) avec l'amendement 1 [1994-01]. Ces mesures ont été obtenues avec un équipement Analyseur en temps réel et un Système automatisé de vérification de test (SADVTS) propriété Starkey utilisant les tests basiques. Ces données peuvent changer si elles sont effectuées avec un autre équipement.

